



有線タイプ ベッドセンサー SS-100A

マットレスに固定するだけ! 無駄鳴り対策のベッドセンサー

抗菌

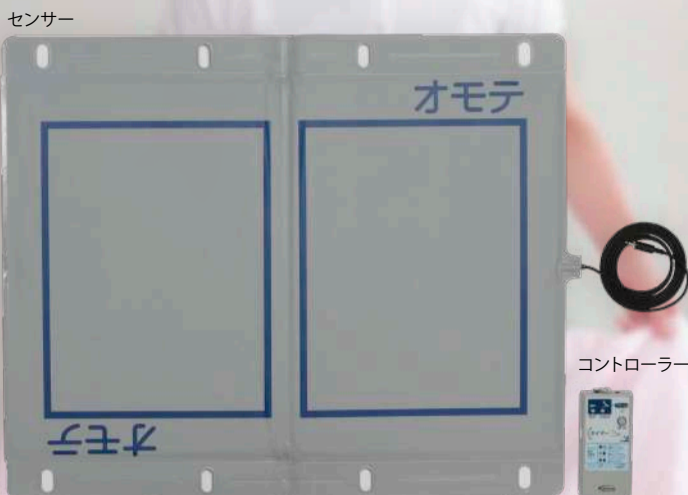

ナースコールケーブルは、アイホン、ケアコム、他の各ナースコールに対応しております。
※別途、ご相談ください。

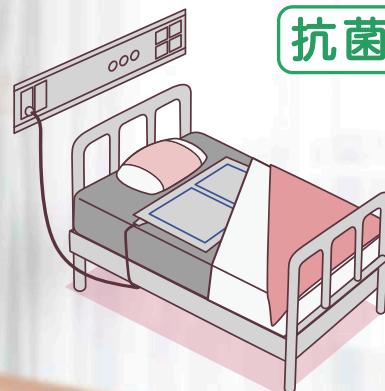

寝返り時の誤検知防止機能

利用者の状態によって、離床判定時間を検出タイマー(0~15秒)で調整できます。

様々なベッド環境に対応できる感度調整機能

センサーの上に常時乗る物(マットや枕など)やマットレスの柔軟度に合わせてセンサーの感度を調整できます。
(検知が難しい体圧分散マットレスにも対応)


クッション性のあるセンサーシート

センサー部にクッション性をプラスしたことで、使い心地の違和感や、利用しているうちに生じるセンサーの経年劣化が原因による無駄鳴りなどを軽減します。

設置後のズレ予防として固定ベルトを付属しています。

型名	SS-100A
センサー	<ul style="list-style-type: none"> ・圧力検知方式 ・サイズ：約580mm×700mm×5mm ・重量：約1 Kg ・抗菌：○ ・ケーブル長さ：センサー~中間スイッチ 約2m ・収納方法：二つ折り ・付属品：センサー固定ベルト 1本
コントローラー	<ul style="list-style-type: none"> ・サイズ：約64mm×132mm×24mm ・重量：約200g(電池込) ・電源：単3形アルカリ乾電池 3本 ・検出タイマー：0~15秒設定 ・センサー感度：3段階設定(軽・中・重)
オプション	<ul style="list-style-type: none"> ・一時停止スイッチ SS-SW01※別売


オプション NEW



離床センサーを一時停止した際の戻し忘れを予防する一時停止スイッチ(自動解除機能付き)をご用意しております。あらかじめ設定した時間が経過した場合、一時停止が自動で解除される機能で、設定できる時間は3分、5分、10分の3段階から選択いただけます。病院内、介護施設内の安全管理に役立ちます。

●リーフレット掲載商品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。
また、実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際には販売店でお確かめ下さい。

お問い合わせ・ご相談は下記の窓口へどうぞ

 **株式会社リース東京**

【本社】 〒175-0082 東京都板橋区高島平9-28-4 エンドレスビル
TEL 03-5398-6231 FAX 03-5398-6610



<https://www.leasetokyo.co.jp>

